



AVANTI
OPTIMIERT BIS
INS DETAIL



AVANTI 1.736

HMV-Nr. 18.50.03.0160

HMV-Nr. 18.50.03.1067

(Rahmen kurz CODE 351)

NUTZERPROFIL

- ✓ Geeignet für Personen mit Restgeh- und Stehfähigkeit
- ✓ Gut einsetzbar bei geriatrischen und neurologischen Krankheitsverläufen
- ✓ Für den Einsatz zu Hause, bei der Arbeit und in der Freizeit
- ✓ Bedarfsgerechte Sitzhöhenverstellung bis hin zu Hemiplegiebedarf

VIELSEITIG ANPASSBARER FALTROLLSTUHL

Der AVANTI begleitet aktiv durch den Alltag und ermöglicht selbstständige Mobilität. Wirtschaftlich und mobil bietet der Adaptiv-Rollstuhl eine gute Alternative bei vielfältigen Aktivitäten. Dank der umfangreichen Anpass- und Ausstattungsmöglichkeiten passt sich der AVANTI an die persönlichen Bedürfnisse an. Durch die Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten verfügt der AVANTI über ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör.

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten, serienmäßiger Anpassrücken
- Druck- oder Trommelbremse mit extrem geringer Betätigungskraft
- Mit Radgrößen 20" und 26" können Sitzhöhen vorne zwischen 370 – 560 mm und hinten zwischen 370 – 520 mm eingestellt werden
- 4 Rahmenlängen, spezielle Rahmenlänge für die Sitztiefen 380 und 400 mm
- Rückenhöhen von 340 – 500 mm erhältlich
- Sitzgurt nachspannbar
- Optionales Seitenteil mit 50 mm Radüberdeckung
- Alu-Doppelkreuzstrebe für Sitzbreiten 360 – 460 mm, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen
- Stützrollen abschwenkbar oder einsteckbar, als Paar oder einzeln



Seitenteilbremse im Kleiderschutz integriert (optional)



Seitenteilbügel, abschwenkbar (optional)



Exzenterverstellung Steuerkopf



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung (optional)



Sehr schmales faltmaß: Breite ab 280 mm; Höhe ab 470 mm (kurzer Rahmen)



Verstärkte Ausführung bis 160 kg und bis Sitzbreite 580 mm



Niedrige Sitzhöhe ab 370 mm




Sitztiefe ab 330 – 530 mm



ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN

AVANTI 1.736

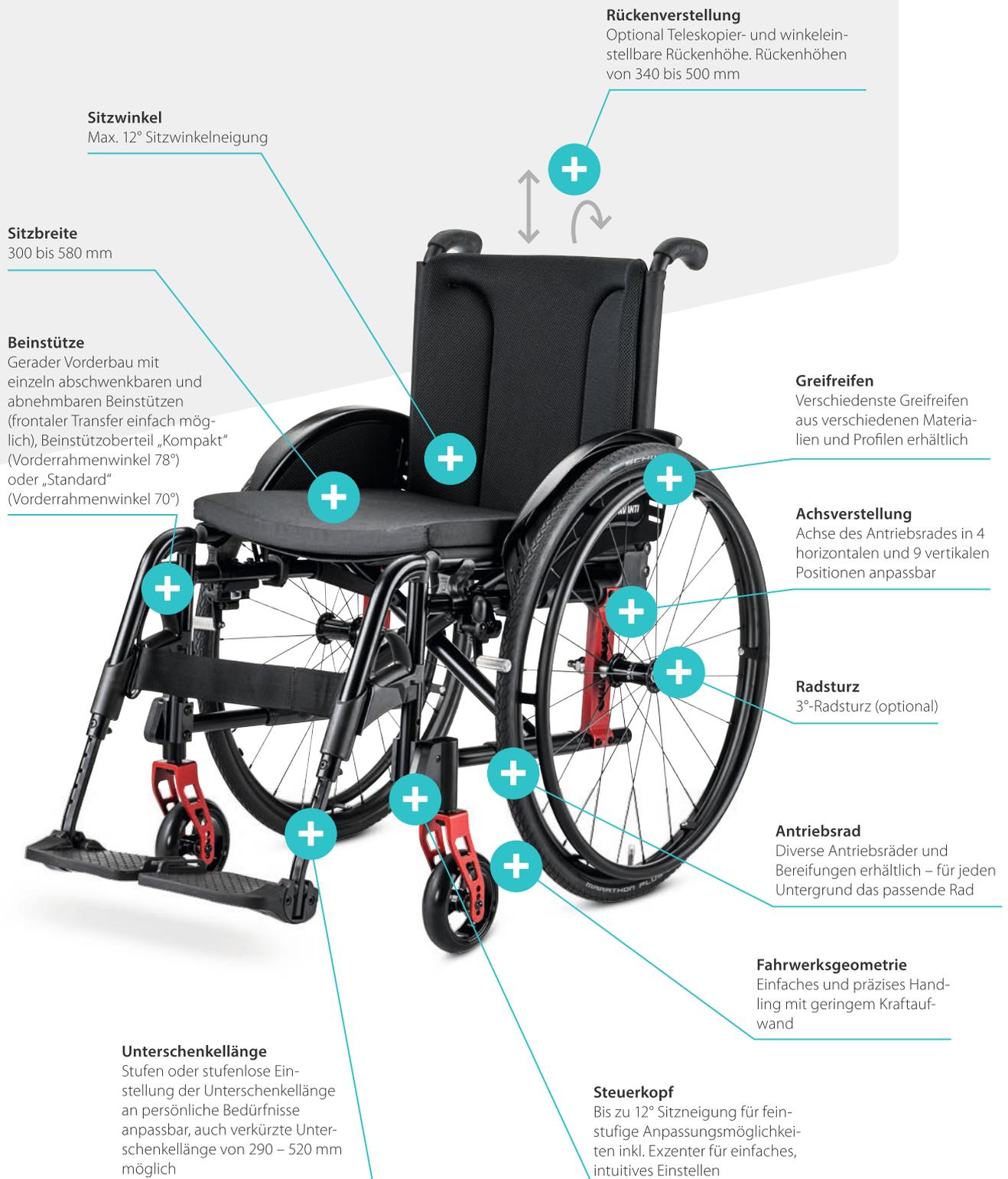

Sitzwinkel
Max. 12° Sitzwinkelneigung

Sitzbreite
300 bis 580 mm

Beinstütze
Gerader Vorderbau mit einzeln abschwengbaren und abnehmbaren Beinstützen (frontaler Transfer einfach möglich), Beinstützberteil „Kompakt“ (Vorderrahmenwinkel 78°) oder „Standard“ (Vorderrahmenwinkel 70°)

Unterschenkellänge
Stufen oder stufenlose Einstellung der Unterschenkellänge an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch verkürzte Unterschenkellänge von 290 – 520 mm möglich

Rückenverstellung
Optional Teleskopier- und winkleinstellbare Rückenlänge. Rückenlängen von 340 bis 500 mm

Greifreifen
Verschiedenste Greifreifen aus verschiedenen Materialien und Profilen erhältlich

Achsverstellung
Achse des Antriebsrades in 4 horizontalen und 9 vertikalen Positionen anpassbar

Radsturz
3°-Radsturz (optional)

Antriebsrad
Diverse Antriebsräder und Bereifungen erhältlich – für jeden Untergrund das passende Rad

Fahrwerksgeometrie
Einfaches und präzises Handling mit geringem Kraftaufwand

Steuerkopf
Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten inkl. Exzenter für einfaches, intuitives Einstellen

TECHNISCHE DATEN

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeit in km/h, Maßtoleranzen ± 10 mm, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

AVANTI 1.736

HMV-Nr.	18.50.03.0160			
Rahmenvarianten	351 Rahmen kurz	349 Rahmen mittel gekürzt	352 Rahmen mittel	353 Rahmen lang
Sitzbreite in mm	300 – 360	360 – 580	360 – 580	360 – 580
Gesamtbreite in mm	SB + 180			
Breite fahrbereit in mm	Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil CODE 100 SB + 180)			
Breite gefaltet in mm	280			
Sitztiefe in mm	330 – 380	380 – 400	350 – 460	480 – 530
Sitzhöhe vorne in mm	370 – 500	370 – 560	380 – 560	380 – 560
Sitzhöhe hinten in mm	370 – 470	370 – 520	370 – 520	370 – 520
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe			
Rückenhöhe in mm	340 – 400	380 – 500	380 – 500	380 – 500
Rückenwinkelstellung in Grad	optional			
Armlehnenhöhe in mm	165 – 240	200 – 290	200 – 290	200 – 290
Länge mit / ohne Fußstütze in mm	880 / 660	1.010 / 740	1.040 / 770	1.120 / 850
Unterschenkellänge in mm	290 – 520			
Nutzergewicht in kg	75	135	135	160
Leergewicht in kg	ab 12	ab 13	ab 13	ab 14
Zul. Gesamtgewicht in kg	90	155	155	185
Transportgewicht in kg	8	8,5	8,5	9
Antriebsrad in mm (Zoll)	508 (20") 560 (22") 610 (24") 635 (25") 660 (26")			
Schwerpunkt in mm	25 – 70			

RAHMENFARBEN

14 Rahmenfarben, davon 10 ohne Aufpreis für individuelle Farbgestaltung, Varioblock und Lenkgabel in einer anderen Rahmenfarbe auf Anfrage möglich.



MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 0
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de